

Wir ziehen Ihre Kosten tief!

Folien: Ø 120 mm + 125 mm



Kombi-ANGEBOT

Tiefziehgerät im Wert von 1.995,00 €
+ Folien im Wert von 1.000,00 €
+ Füllgranulat im Wert von 70,00 €
~~statt 3.065,00 €~~

nur 2.295,- €

im Leasing nur 36 x 68,28 €

Leistungsstark – Schnell – Effizient

DUNAFORM PLUS - Druckformgerät

Sofort auf Betriebstemperatur = kein Vorheizen notwendig

Arbeitsdruck bis zu 6,0 bar stufenlos einstellbar

Folienaufnahme für runde Folien Ø 120 mm + 125 mm, sowie Folienstärke 0,1 mm bis 5,0 mm (Für annähernd alle marktüblichen Tiefziehfolien geeignet)

Menügesteuerte, anwenderfreundliche Bedienung

Großes, übersichtliches Display

Folienparameter fest im System hinterlegt plus 10 freie Programmplätze

Optische und akustische Zeitinformationen (Assistenzfunktion)

Erwärmung der Tiefziehfolie erfolgt auf der dem Modell zugewandten Seite



Technische Daten	
Netzanschluss:	230 V/50 Hz
Leistung:	850 W
Arbeitsdruck:	bis 6,0 bar (einstellbar)
Gewicht:	ca. 8,5 kg
Breite:	350 mm
Tiefe:	300 mm
Höhe:	190 mm

MADE
IN
GERMANY

Unsere Auswahl – Ihre Möglichkeiten

Bedarfsgerecht – Flexibel – Schnell - TIEFZIEHFOLIEN

al dente Tiefziehfolien eignen sich für sämtliche Anwendungen der Tiefziehtechnik.

Die Lösung für alle gängigen Anwendungen in Labor und Praxis

Ihre Vorteile auf einen Blick:



- Bestmögliche Verarbeitungs- und Anwendungssicherheit, durch gewährleistete hohe Qualität
- Sämtliche Tiefziehfolien auf Biokompatibilität geprüft und mit CE-Kennzeichen
- Größtmögliche Sicherheit bei der Verarbeitung und beim Gebrauch der Folien für Anwender und Patienten garantiert



EINSATZGEBIET	FOLIENART	EINSATZGEBIET	FOLIENART
Aligner	Folidur N (0,5 - 0,8 mm)	Komfortable Knirscherschienen	Combiloc Plus (2,0 - 4,0 mm)
Aufbissschienen (halb-hart)	Foliflex (3,0 / 4,9 mm)	Kosmetische Schienen	Snap On (0,6 - 1,0 mm)
Aufbissschienen (hart)	Folidur N (1,5 - 3,0 mm)	Medikamententräger	Foliflex bleach/Foliflex (1,0 - 1,5 mm)
Aufbissschienen (weich/hart)	Combiloc Plus (2,0 - 4,0 mm)	Michiganschienen	Folidur N (1,5 - 3,0 mm)
Bleachingschienen	Foliflex bleach / Foliflex (1,0 - 1,5 mm)	Miniplastschienen (hart)	Folidur N (1,0 - 1,5 mm)
Bracketttransferschienen	Folilen (1,0 mm)	Miniplastschienen (weich/hart)	Combiloc Plus (2,0 mm)
Bracketübertragungsschienen	Foliflex (1,5 - 2,0 mm)	Platzhalterfolie für flüssige Therapeutika	Folilen (0,6 - 0,7 mm)
Dublierformen	Foliflex (3,0 - 4,0 mm)	Platzhalterfolie für gelartige Therapeutika	Folilen (1,0 mm)
Essix Retainer	Folidur N (0,6 - 0,8 mm)	Positioner	Foliflex (3,0 - 4,0 mm)
Fluoridierungsschienen	Foliflex bleach / Foliflex (1,0 - 1,5 mm)	Provisorien	Folidur N (0,8 - 1,0 mm)/ Folilen (1,0 - 1,5 mm)
Gussformteile	Folilen (0,5 - 1,0 mm) / Folidur N (0,5 - 0,8 mm)	Retainer	Folidur N (0,8 - 1,0 mm)/ Combiloc Plus (2,0 mm)
Gusskäppchen	Folilen (0,5 - 0,7 mm)	Retentionsschienen	Folidur N (1,5 - 2,0 mm)
Gusskäppchen (hart)	Folidur N (0,5 - 0,6 mm)	Verbandplatten	Folidur N (1,0 - 2,0 mm)
Implantatschienen	Folidur N (1,5 - 2,0 mm)	Zahnfleischverband	Folilen (1,0 - 1,5 mm)
Knirscherschienen	Folidur N (1,5 - 3,0 mm)		

Zubehör - Tiefziehtechnik

Selbstverständlich bieten wir alles Weitere rund um die Tiefziehtechnik an: Schleifsets, Polierscheiben, Granulatabdeckschablonen, Folienscheren und vieles mehr.

Wir ziehen Ihre Kosten tief!

Folien: Ø 120 mm

Kombi-ANGEBOT

Tiefziehgerät im Wert von 1.625,00 €
+ Folien im Wert von 1.000,00 €
+ Füllgranulat im Wert von 70,00 €
~~statt 2.695,00 €~~

nur 1.999,- €

im Leasing nur 36 x 59,47 €



Die Lösung für alle gängigen Anwendungen in Labor und Praxis

DUNATRONIC - Vakuumtiefziehgerät

- Für sämtliche Arbeitsbereiche geeignet
- Kein Druckluftanschluss notwendig
- Sehr leise Vakuumpumpe mit hoher Leistung
- Keine Vorheizzeit durch kurzwelligen Infrarotstrahler
- Heiz- und Abkühlzeiten programmierbar
- Folienschnellspannung für Folienstärken von 0,1 mm – 5,0 mm
- Mittels Folientastatur frei programmierbar
- Optische und akustische Zeitinformationen


Technische Daten	
Netzanschluss:	230 V/50 Hz
Leistung:	850 W
Arbeitsvakuum:	-0,8 bar
Gewicht:	ca. 9 kg
Breite:	270 mm
Tiefe:	320 mm
Höhe:	260 mm

MADE
IN
GERMANY

Ihr zuverlässiger Partner in Praxis und Labor

Zuverlässigkeit, Verständnis für innovatives Arbeiten sowie Vertrauen betrachten wir als Grundlage unseres Handelns. Dies ermöglicht auch Ihnen, den individuellen Ansprüchen Ihrer Patienten gerecht zu werden. Daher basiert unsere Produktentwicklung, Produktion und gleichbleibende Leistung besonders auf diesen vier Werten:

✓ Qualität ✓ Kundenorientierung ✓ Innovation ✓ Fairness

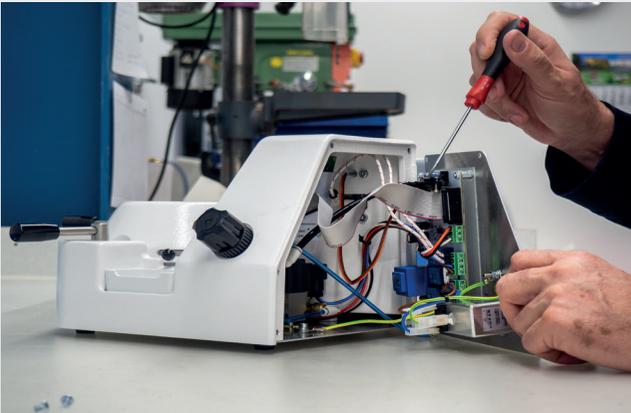

QS-SYSTEM NACH
DIN ISO EN 9001:2015



Technik-Hotline: 0 53 21 - 33 49 581
Technischer Service: support@aldente.de

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Vertrieben durch:



Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
DE-51688 Wipperfürth

Tel.: +49 2267 6580-0

www.picodent.de
picodent@picodent.de



Diese Aktionsartikel bestellen Sie bitte über den oben stehenden QR-Code oder telefonisch bei Ihrem Vertriebspartner.