

Lichthärtende Präzisionsmaterialien

Perfektion durch Präzision mit der pico-line



pico-light LED

Sekundenschnelle und
perfekte Aushärtung

LED Polymerisationslampe

Hochleistungs-Lichthärtegerät der Spitzenklasse zur Aushärtung von lichthärtenden Präzisionsmaterialien im Labor.

Der extrem leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht Ihnen über 3 Stunden im Dauerbetrieb auszuhärten, bevor das Gerät wieder am Stromnetz aufgeladen werden muss.


Vertrieb exklusiv durch picodent®.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hochwertiges Metallgehäuse
- Sekundenschnelle und perfekte Aushärtung
- Minimales Gewicht ermöglicht Ihnen ein entspanntes und angenehmes Arbeiten
- Einfache Handhabung
- Extrem leistungsfähig
- Abgestimmt auf alle lichthärtenden Präzisionsmaterialien von picodent®.

Technische Daten:

- Gewicht: 183 g
- Wellenlänge: 400 +/- 10 nm
- Lichtintensität: 400 - 600 Lumen
- Länge: 230 mm
- Lithium-Ionen-Akku: 4200 mAh, 3,7 V
- Netzteil: Euro Standard, 100 - 240 V / AC, 50 / 60 Hz, 4,2 V, 300 mAh

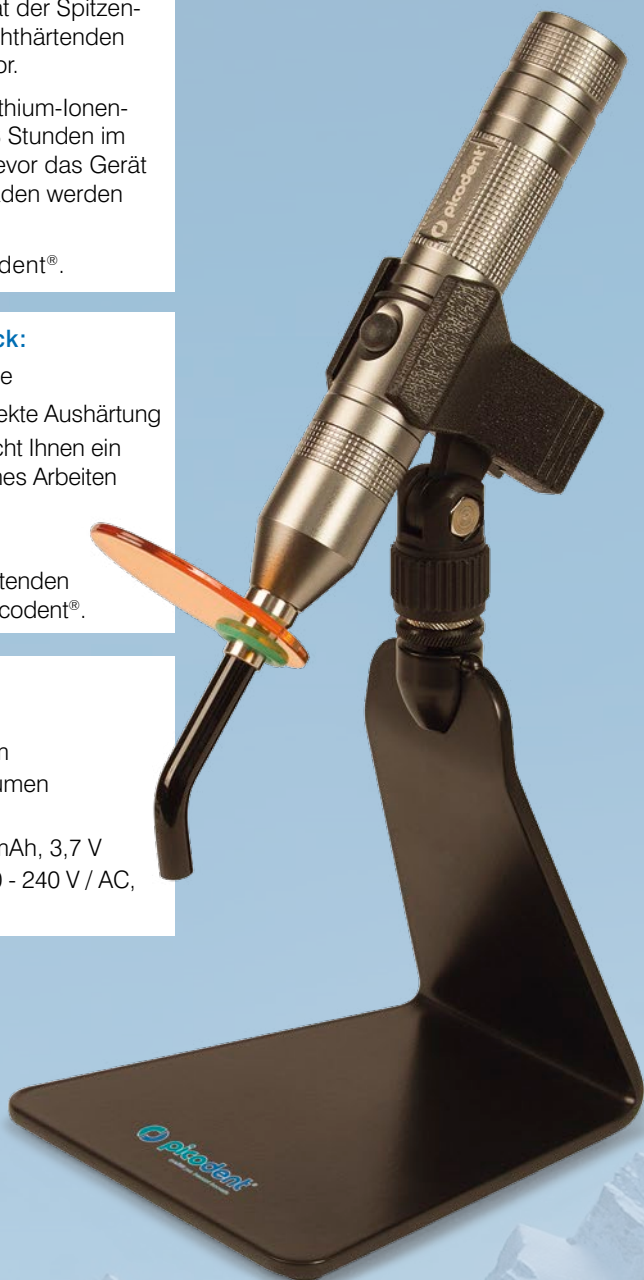

picobello plus gel, kristallblau

Lichthärtender Modellierkunststoff

Eine neue Generation lichthärtender Modellierkunststoffe, für zahntechnische Anwendungen, insbesondere für Fräs- und Geschiebearbeiten. Modellationen können vor dem Guss oder dem Fräsen im Mund ausprobiert werden.

Die hohe Transluzenz von picobello plus gel ermöglicht eine leichte Kontrolle der Schichtstärke, insbesondere beim Modellieren und Ausarbeiten.

picobello plus gel kann direkt aus der Dosierspritze aufgetragen werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Rückstandsloses Verbrennen auch bei größeren Schichtstärken
- Noch kürzere Aushärtezeit
- Sehr gut beschleifbar
- Hohe Standfestigkeit

Anwendungsgebiete:

- Passgenaue Herstellung von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen
- Schnelle und exakte Herstellung jeglicher Gussobjekte z. B. Klammern und Retentionen
- Modellation von Suprakonstruktionen
- Anfertigung von Fixierungs- und Übertragungsschlüsseln
- Modellation individueller Implantataufbauten
- Verzugsfreie Verblockung von Gerüsten



CE 0124

picobello gel

Lichthärtender Modellierkunststoff

Gelförmiger, lichthärtender Modellierkunststoff aus der Dosierspritze, insbesondere für Fräs- und Geschiebearbeiten, Kronen und Brücken sowie die Verblockung von Gussobjekten auf dem Modell und im Mund u. a. m. – fließendes Auftragen mit hoher Standfestigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hervorragende Passgenauigkeit
- Verbrennt rückstandslos
- Fließendes Auftragen mit hoher Standfestigkeit
- punktgenaues Fixieren und Verblocken auch im Mund



picobello form

Lichthärtender Modellierkunststoff

picobello ist ein lichthärtender Modellierkunststoff für die Herstellung passgenauer Geschiebe, Teleskop- und Konusarbeiten, Suprakonstruktionen, Implantataufbauten u. a. m.

picobello gibt es als gel und als Modelliermaterial picobello form für schnelleres Arbeiten bei größerem Materialauftrag z. B. bei der Anfertigung von Fixierungs- und Übertragungsschlüsseln.

picobello plus gel, picobello gel und picobello form sind kompatibel und können deshalb ideal zusammen verwendet werden.

Beim Auftrag mit der Spritze oder der Modellation von Hand erhalten Sie immer die richtige Konsistenz für jedes Anwendungsgebiet.



picopreci plus

Lichthärtender Präzisionskunststoff

picopreci plus ist ein gelförmiger, lichthärtender Präzisionskunststoff für den Gebrauch auf dem Modell im Dentallabor als auch direkt im Mund des Patienten.

picopreci plus ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten bei kurzen Polymerisationszeiten. Das Material zeichnet sich durch präzises Auftragen direkt aus der Spritze mittels Dosierspitze sowie durch seine hohe Standfestigkeit aus, d.h. der Verbrauch ist sparsam, der Zeitaufwand gering und die Platzierung exakt. picopreci plus ist MMA-frei.

Der mitgelieferte picopreci plus Bonder ermöglicht den sicheren Verbund mit PMMA-Kunststoffen.

picopreci plus ist in den Farben rosa, rosa opak (34), zahnfarben und glasklar erhältlich.



Anwendungsgebiete:

- Reparieren, Ergänzen und Korrigieren von adjustierten Aufbissschienen
- Positionierung und Fixierung von Funktionsteilen an KFO-Geräten, Röntgen- und Bohrschablonen
- Herstellen von Fixierungs- und Implantatschlüsseln
- Feinkorrekturen in Kunststoff (z. B. Papillen)
- Verschließen von Mikrospalten
- Gestalten von Papillen
- Fixieren von Zähnen auf dem Modell
- Reparaturen von Provisorien
- Punktgenaues Arbeiten im Mund, z.B. verschließen von Schraubenkanälen



Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Standfestigkeit
- Sehr sparsam zu dosieren
- Gute Modelliereigenschaft

picobloc gel

Für punktgenaues
Ausblocken

Lichthärtendes Ausblockmaterial

Lichthärtendes Ausblockmaterial
direkt aus der Spritze.

Anwendungsgebiete:

- Verschließen von Sägeschnitten
- Ausblocken von Cervikalrändern
- Ausblocken zum Tiefziehen von Bleachingschienen
- Abdecken beim Sandstrahlen
- Ausblocken von Stümpfen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Punktgenaues Ausblocken direkt aus der Spritze
- Sehr schnelle Aushärtung
- Sicheres und sauberes Arbeiten



pico-tray

Lichthärtendes Löffelmaterial

Zur Herstellung individueller Abformlöffel
und Bisssschablonen. Passend für Ober-
und Unterkiefer. Lieferbar in 3 verschiedenen
Farben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Gleiche Schichtstärke
- Geringe Schrumpfung
- Hohe Formstabilität
- Zeitsparend - geringe Nacharbeitung
- In 3 verschiedenen Farben erhältlich





picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

Telefon +49 2267 6580-0
Fax +49 2267 6580-30
Internet www.picodent.de
E-Mail picodent@picodent.de

